

- ↻ **Drehbarer Griff**
- ↻ **Bequemes Arbeiten**
- ↻ **Einstellbar für kleine Hände**
- ↻ **Kompatibel mit den vorhandenen Einsätzen**
- ↻ **Made in Germany**

# ROTARIS®

## Der Griff mit dem Dreh


Rotaris – der Griff mit dem Dreh. Unabhängig von der Position des Chirurgen zum Patienten kann diese neuartige Bipolarzange durch einfaches Drehen des Griffs immer in eine ergonomisch, optimale Position gebracht werden. Dadurch wird eine vorzeitige Ermüdung vermieden und ein entspanntes, präzises Operieren ermöglicht.

[www.micromed.biz](http://www.micromed.biz)


Micromed Medizintechnik GmbH  
Eisenbahnstr. 84  
D-78573 Wurmlingen

Tel 07461 / 96 48 550  
Fax 07461 / 96 48 5595

[info@micromed.biz](mailto:info@micromed.biz)  
[www.micromed.biz](http://www.micromed.biz)

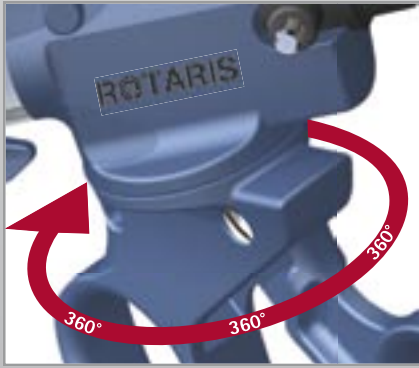

**Griff Nr. 126-002-900**

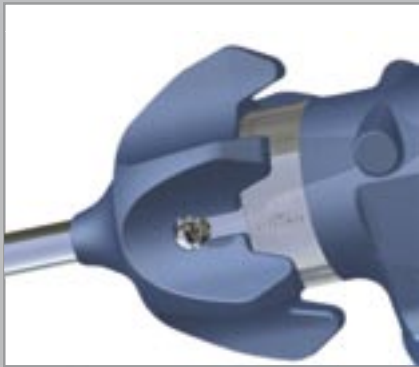

**Schaft Nr. 126-002-800**

### Drehbarer Griff

Der um 360° drehbare Griff kann in die gewünschte, ergonomisch, optimale Position eingestellt werden. Durch die daraus resultierende, gegenüber handelsüblicher Griffe, deutlich verbesserte Arbeitshaltung steht dem Chirurgen erstmals ein bipolares Instrument zur Verfügung, bei dem nicht nur Funktion und Sicherheit sondern auch die spezifische Arbeitssituation des Chirurgen bei minimalinvasiven Eingriffen in besonderer Weise berücksichtigt wurde.

### Bequeme Einhandbedienung


Durch verlängerte Flügel kann der Chirurg das Drehrad in jeder Position des Griffs bequem mit einem Finger um 360° bewegen und dadurch die Elektrode genau positionieren. Wie bereits bei der bewährten Bipolarzange, wird Schaft und Elektrode durch einen einfachen Schnellverschluss in den Griff montiert. Die Elektrodeneinsätze der Standard Bipolarzange sind vollständig kompatibel mit dem Rotaris-Griff. Hierdurch steht die gesamte Auswahl bewährter Elektroden zur Verfügung und Verwechslungen werden vermieden.

### Einstellbar für kleine Hände

Durch werkseitig justierbare Komponenten kann der Rotaris-Griff auch für kleinere Hände passend eingestellt werden. Hierdurch wird die Kontrolle und Stabilität bei der Handhabung zusätzlich optimiert. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung.


## Bipolare Koagulationsfazzange ROTARIS mit Zubehör

Bipolarer Dissektor Maryland, gebogen mit Rotaris-Griff und Schaft

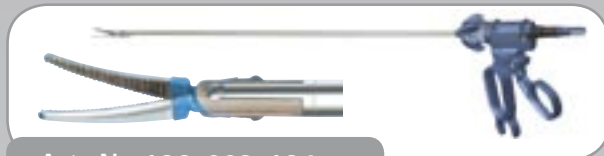

**Art.-Nr. 126-002-134**

Bipolare Fazzange mit Rotaris-Griff und Schaft

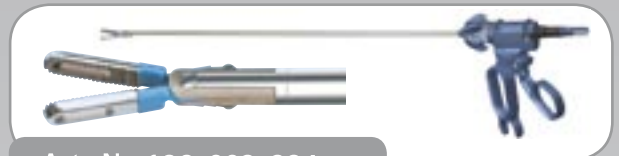

**Art.-Nr. 126-002-234**

Bipolare Fazzange, gebogen mit Rotaris-Griff und Schaft



**Art.-Nr. 126-002-334**

Bipolare Delta-Fazzange mit Rotaris-Griff und Schaft



**Art.-Nr. 126-002-434**

Bipolare Pinzette, gebogen mit Rotaris-Griff und Schaft



**Art.-Nr. 126-002-534**

Bipolare Schere mit Rotaris-Griff und Schaft



**Art.-Nr. 126-002-634**

**Alle Teile sind auch einzeln erhältlich.**