


SealCut

Bipolare Koagulationszange mit Messer

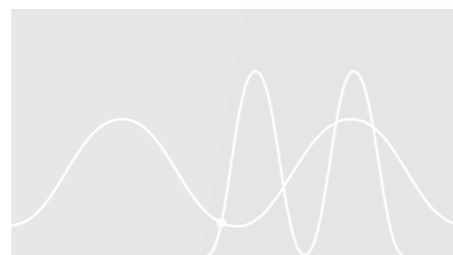

www.micromed.com

Micromed Medizintechnik GmbH
Eisenbahnstr. 84
78573 Wurmlingen
Deutschland

Tel +49 7461 9648550
Fax +49 7461 96485595

info@micromed.com
www.micromed.com


© 03.2026



SealCut

MICROMED SealCut – bipolare Koagulationszange mit Schneidefunktion. SealCut ist ein wiederverwendbares Instrument, das dem Chirurgen ermöglicht Gewebe oder Gefäße mit dem Maul zu fassen, zu koagulieren oder zu versiegeln und anschließend, ohne Instrumentenwechsel zu durchtrennen. Das Instrument kann zur Reinigung in seine fünf Einzelteile zerlegt werden. SealCut ist wiederverwendbar, was zu einer erheblichen Kostensenkung pro Operation führt. Die austauschbare Wegwerfklinge führt zudem zu ständiger Schärfe des Instruments.


- Zwei Längen: 25 cm und 34 cm
- Stumpfe Dissektion
- Atraumatische Spitze
- Austauschbares Messer: immer scharf
- Kostenersparnis: Wiederverwendbarkeit
- Standard-Flachstecker für alle gängigen Kabel
- Zerlegbar ohne Zusatzinstrumente
- Hohe Qualität: Made in Germany

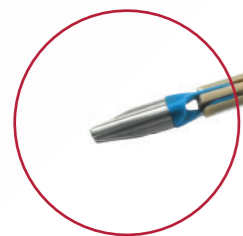

Koagulieren, Versiegeln und Schneiden ohne Instrumentenwechsel



Auswechselbares Messer, Verpackung à 20 Stück
Leichter Austausch mit Schutzkappe, die beim Wechseln automatisch abfällt.

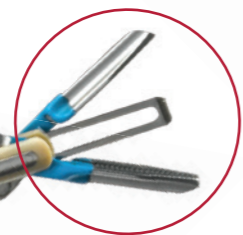

Atraumatische Spitze ermöglicht eine verletzungsfreie Gewebepräparation.



Bequeme Einhandbedienung
Durch verlängerte Flügel kann der Chirurg das Drehrad in jeder Position des Griffs bequem mit einem Finger um 360° bewegen und dadurch die Elektrode genau positionieren.

Standard-Flachstecker passend für alle gängigen Kabel

Ergonomischer Messergriff



Komplett-Instrument

SealCut LAP Instrument 34 cm	126-120-134
SealCut LAP Instrument 25 cm	126-120-125

Einzelteile

SealCut Griff	126-020-900
SealCut Elektrode 34 cm	126-020-134
SealCut Elektrode 25 cm	126-020-125
SealCut Schaft 34 cm	126-020-834
SealCut Schaft 25 cm	126-020-825
SealCut Klingenthalerrohr 34 cm	126-020-734
SealCut Klingenthalerrohr 25 cm	126-020-725
SealCut Schubstange 34 cm	126-020-634
SealCut Schubstange 25 cm	126-020-625
SealCut Klinge (20 Stück)	126-020-000

	3 m	130-170-300
	5 m	130-170-500
	3 m	130-130-300
	4 m	130-130-400
	5 m	130-130-500
	3 m	130-120-300
	4 m	130-120-400
	5 m	130-120-500
	3 m	130-140-300
	4 m	130-140-400
	5 m	130-140-500